


岛津网络系统解决方案

光谱类仪器

随着近年来法规应对需求的越来越旺盛，岛津公司为了适应时代的发展，推出了隶属于LabSolutions家族的LabSolutions Manager工作站。其结合光谱仪器自身的控制软件，可以将光谱类仪器升级为网络化或者单机数据库化的工作站系统。从而在保留用户使用习惯的基础上，满足光谱类仪器的数据管理、审计追踪、电子签名、访问控制等现代实验室必备的需求。

同时，所有的数据信息、人员信息和日志信息都由数据库统一存储，既能节省宝贵的管理时间，又可以避免人为误操作。

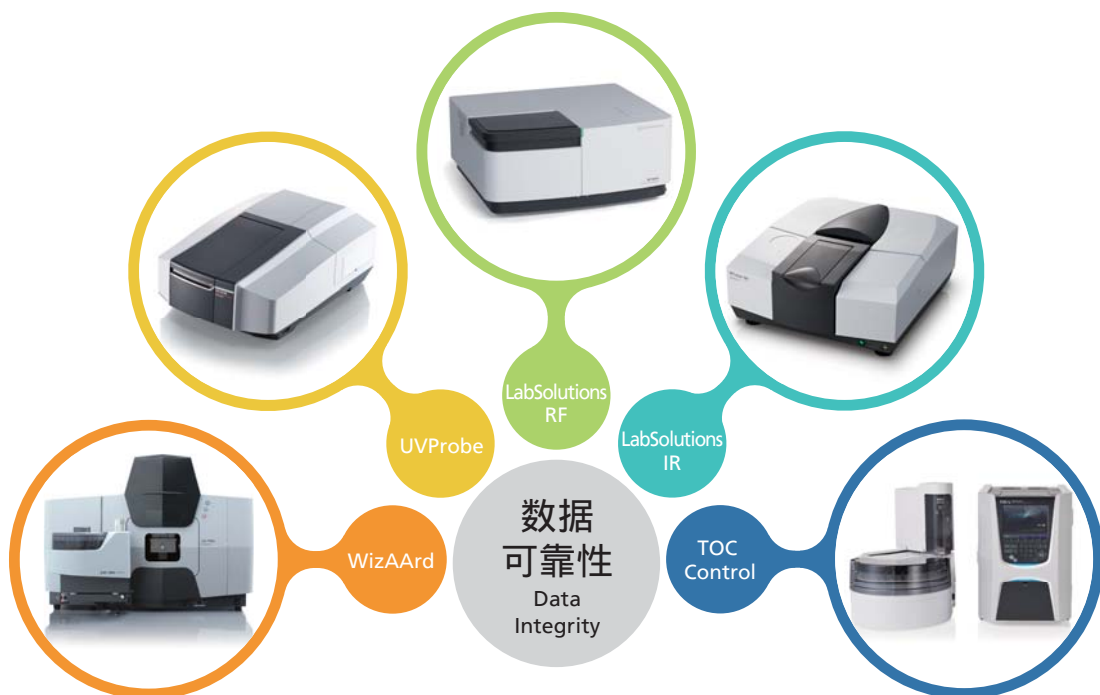

审计追踪

- 不仅保存有光谱仪器的数据文件和PDF图谱，还有操作历史文档和扫描参数等文件，便于溯源。
- 仪器的操作记录都保存在日志浏览器中。



数据管理

- 具有数据版本号功能，彻底杜绝了数据文件被删除、被覆盖及其他的误操作。
- 数据储存在数据库中，可随时将其备份至DVD等存储介质中，随时供调阅而无需恢复。



访问控制

- 自带多个级别的用户权限组，并且可以自定义添加新的权限组或者修改现有的权限组设置。
- 具有密码策略、用户锁定策略、PC锁定策略等必须的访问控制功能。




电子签名

- 只需要点击鼠标，就能完成对数据的审核，无需在纸质报告上的重复手工签字。
- 结合用户权限设置，可将已签名的数据锁定，起到保护数据的功效。



针对实验室中的各类仪器，岛津公司为您提供先进的整体解决方案。

借助于LabSolutions CS，可以进行完全网络化的仪器操作和数据管理，所有的数据包括光谱仪器、色谱仪器及其他仪器的数据等信息都在LabSolutions服务器上存储、读取和处理，确保仪器的安全性和数据的溯源性，完全符合现代实验室所必需的GxP和FDA 21 CFR PART 11的合规性要求。

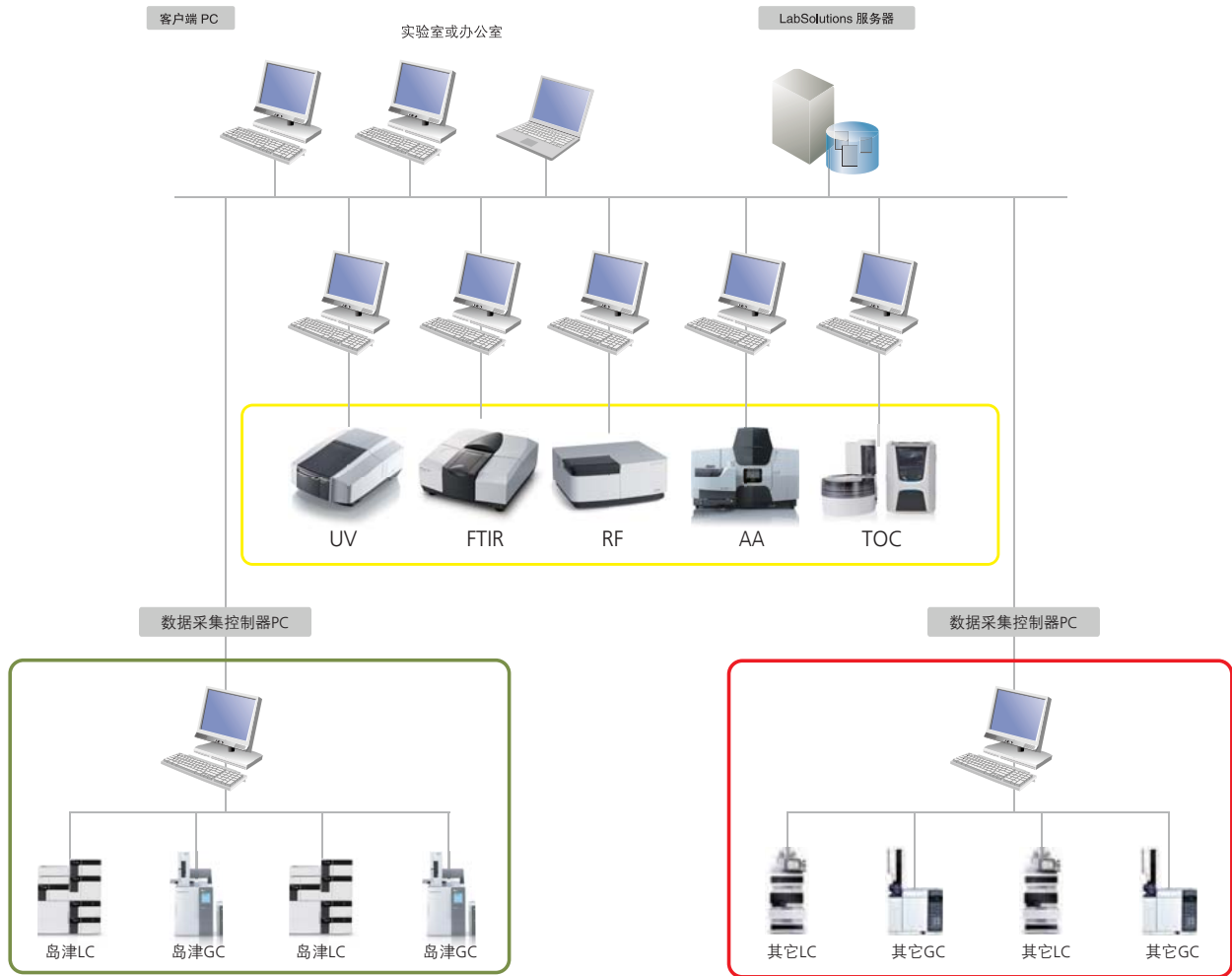

北京
电话: (010) 8525-2310/2312
上海
电话: (021) 3419-3888
沈阳
电话: (024) 2341-4778
郑州
电话: (0371)8663-2981/2983

乌鲁木齐
电话: (0991) 230-6271/6272
昆明
电话: (0871) 6315-2987
南京
电话: (025) 8689-0258

<http://www.shimadzu.com.cn>

用户服务热线电话: 800-8100439 400-6500439

成都
电话: (028)8619-8421/8422
广州
电话: (020) 8710-8666
西安
电话: (029) 8838-6350

深圳
电话: (0755) 8340-2852
重庆
电话: (023) 6380-6068/6058
武汉
电话: (027) 8555-7910

印刷日期: 2018.03

注: 此样本所有信息仅供参考, 如有变动恕不另行通知