
MS数据库&MSn数据库批量库搜索与报告输出

1、在【方法视图】里设置好【库搜索】或【（MSn）库搜索】后，点击左上角工具栏“文件”，选择“方法另存为，保存方法文件：




2、选择【主项目】中的【生成报告】，从上方工具栏中选择“MS谱库搜索”

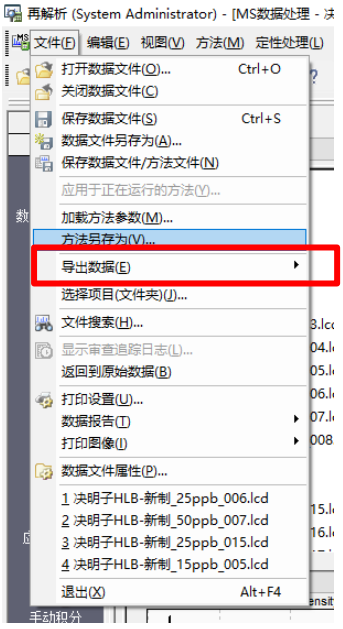


，在报告模板中添加该模块。在【MS谱库搜索属性】中选择【结果】标签，在“打印目标”里选择需要输出库或（MSn）库，点击“确定”。点击左上角工具栏，选择“报告格式文件另存为”，保存报告格式文件：




岛津应用云

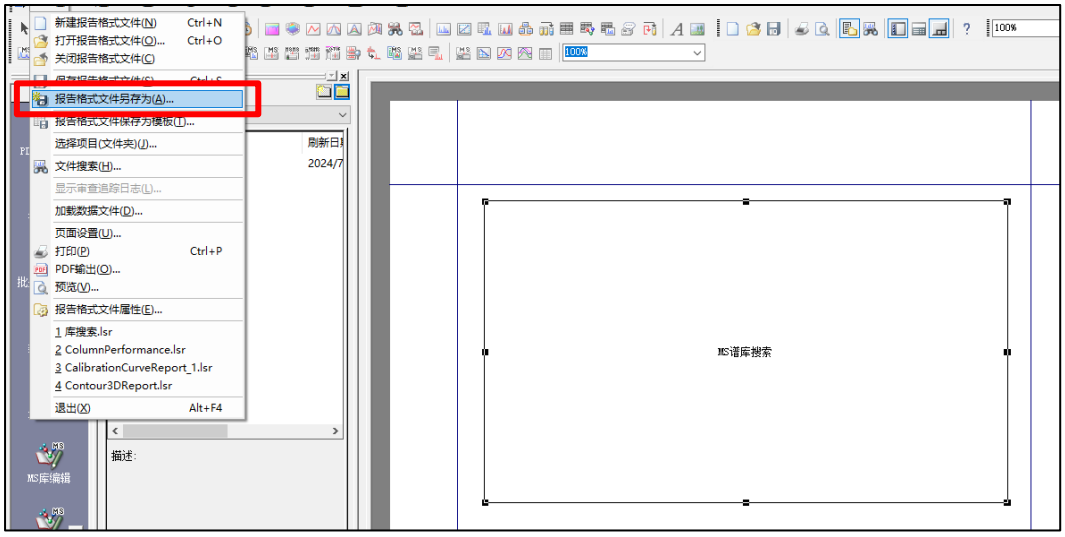

3、在【主项目】里选择【批处理再解析】，拖入数据文件，选择对应方法文件及报告格式文件，勾选“输出报告”。点击上方工具栏“工具”，选择“选项”，在【PDF输出】标签下勾选“将报告重定向到PDF文件”，如需同时打印报告，则勾选“在PDF输出过程中打印报告”，点击“确认”：

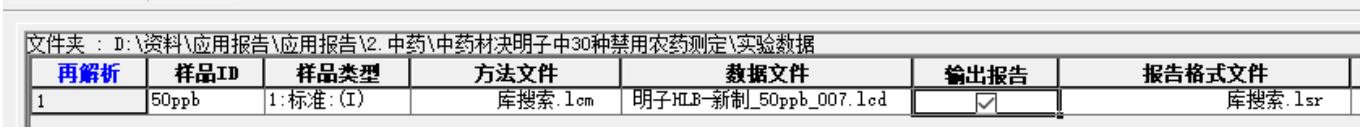

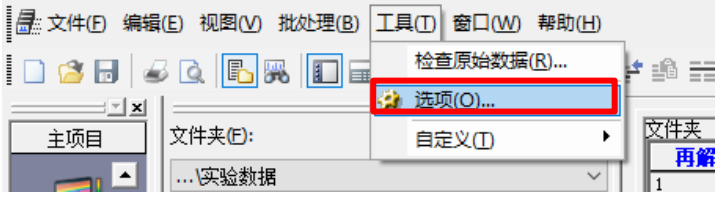



4、保存批处理表，点击“批处理再解析开始”执行批处理。执行完毕后，可在存放该数据文件的文件夹中找到与数据文件同名的PDF报告：

